


Sonický elektrický zubní kartáček

Návod k obsluze

GTS2020

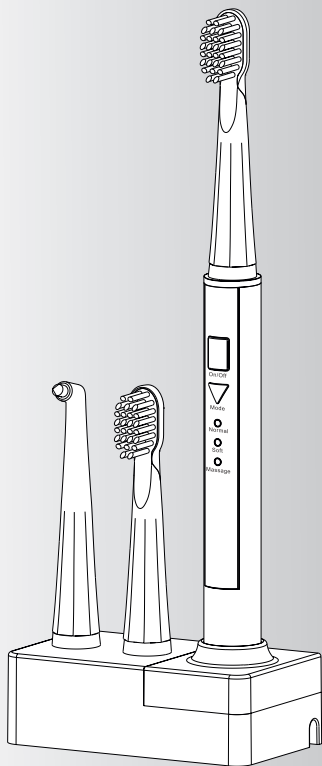

Sonický elektrický zubní kartáček

GTS2020

Bezpečnostní pokyny

Než začnete výrobek používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně a nezanížit sebe ani jiné osoby.

Pozor na vodu

Chraňte nabíječku před vodou:

1. Nepoužívejte přístroj při koupání.
2. Chraňte zařízení před pádem do vody či jiné tekutiny.
3. Přístroj nestavte a neukládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla či vany.
4. Spadne-li nabíječka do vody, nedotýkejte se jí. Okamžitě ji odpojte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
5. Nedotýkejte se zástrčky mokryma rukama.

Pozor na elektrický proud

Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na spodku nabíječky souhlasí s napětím v rozvodné síti, k níž ji budete připojovat:

1. Napájecí šňůra se nedá vyměnit. Dojde-li k jejímu poškození, přístroj je nutné zlikvidovat. Nepoužívejte přístroj, který dobře nefunguje, je poškozený například pádem nebo přístroj, který se dostal do vody. Zjistíte-li jakékoliv poškození, přístroj ihned vypněte a dále ho nepoužívejte.
2. Nepoškozujte, nelámejte a neohýbejte napájecí šňůru. Neohýbejte ji, netahejte za ni, nekrutěte s ní zbytečně. Nestavte na šňůru těžké předměty, dbejte, aby šňůra nebyla nikde přivěná.
3. V případě potřeby vyměňte nabíječku za bezpečný originální typ. Zárukou kompatibility nejsou napěťové převodníky.
4. Před jakýmkoliv zásahem nabíječku odpojte ze sítě.
5. Nepoužívejte nabíječku venku a v blízkosti horkých předmětů.

Upozornění


1. Přístroj použijte pouze k účelu popsanému v této příručce. Používejte pouze příslušenství k zařízení doporučené výrobcem.
2. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zubní kartáček používat pouze pod dohledem a po bezpečnostním poučení. Také čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.
3. S přístrojem si nesmí hrát děti.
4. Kartáček se smí používat pouze s nabíječkou dodanou v jeho příslušenství.
5. Nepokoušejte se z přístroje vyndat baterii.
6. Nepokládejte na nabíječku drobné kovové předměty, například mince nebo sponky.
7. Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje peroxid vodíku, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (jak je obvyklé v bělicích zubních pastách), důkladně nástavec i rukojeť kartáčku čistěte, aby plasty nepopraskaly.

Sonický elektrický zubní kartáček

GTS2020

8. Nemyjte přístroj v myčce.
9. Zubní kartáček je předmět osobní péče a není určen k použití více osobami, v zubních ordinacích či institucích.
10. Pokud vám kartáček začne v ústech působit nepříjemnosti nebo bolest, přestaňte jej používat a poraďte se se zubním specialistou.
11. O používání elektrického kartáčku v době dvou měsíců po operačním zákroku v ústní dutině nebo na dásních se poraďte se zubním lékařem.
12. V odborných zkouškách kartáček prokázal, že vyhovuje bezpečnostním normám pro elektromagnetická zařízení. Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití elektrického kartáčku předem konzultovat s lékařem nebo výrobcem zařízení.

Součásti zařízení

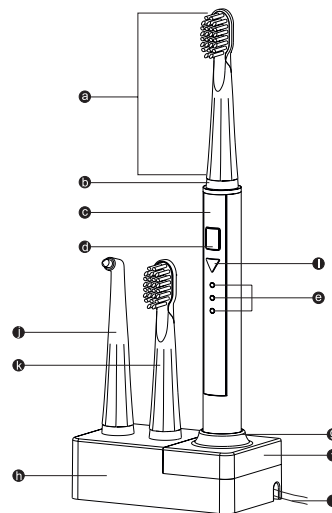

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Kartáček | g. Nabíjecí konektor |
| b. Kroužek spojky | h. Nabíječka |
| c. Aplikační rukojeť | i. Síťový kabel |
| d. Vypínač | j. Mezizubní kartáček |
| e. Indikátor nabíjení | k. Super kartáček |
| f. Kryt nabíječky | l. Volič režimu |


Sonický elektrický zubní kartáček

GTS2020

Začínáme


Instalace šňůry nabíječky

Podle umístění nabíječky připevněte šňůru do pravého, levého nebo středního vodičového oka.

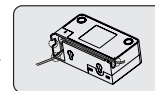


Instalace k umývadlu nebo na polici

Nabíječka musí stát na vodorovné pevné ploše. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

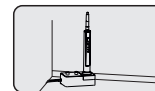


Montáž na stěnu

Do stěny 41 mm od sebe upevněte dva vrtáky, aby vyčnívaly 2,5 mm z povrchu stěny.

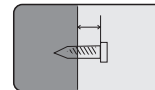


Přiložte otvory na zadní straně nabíječky na šrouby a upevněte.

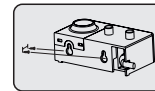

Nabíjení baterie kartáčku

Před nabíjením kartáček vypněte. Vsadte rukojeť do nabíječky. Indikátor nabíjení se rozsvítí zeleně.

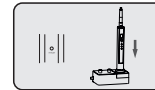


Poznámky:

1. Úplné nabití baterie vyžaduje alespoň 24 hodin. Indikátor svítí i po úplném nabití.
2. Po úplném nabití vydrží kartáček běžet nejméně 40 minut.
3. Se stárnutím baterie se zkracuje doba použitelnosti po nabití.
4. Nabíjení 24 hodin je potřebné:
 - a. před prvním použitím kartáčku,
 - b. pokud se přístroj nepoužíval déle než 3 měsíce,
 - c. pokud při čištění začne indikátor nabití zeleně blikat.
5. Úplné nabití je vhodné provést v době, kdy se kartáček nepoužívá.
6. Během nabíjení se kartáček zahřívá. Jde o normální jev.
7. Jakmile se dá kartáček po nabití použít jen krátce, znamená to, že životnost baterie končí. Nechte baterii vyměnit v odborném servisu.

Způsob použití

1. Nasaďte nástavec výčňelkem ke žlábkům v rukojeti a otočením jej upevněte. Musí slyšitelně zaklapnout.

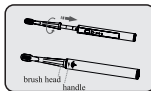

2. Namočte hlavu kartáčku a naneste malé množství zubní pasty.

3. Přiložte kartáček na zuby s malým sklonem vůči linii dásně.




4. Stiskem voliče vyberte režim.

- a. Normální – způsob nejúčinnějšího čištění zubů
- b. Jemný – způsob čištění citlivých zubů a dásní
- c. Masáž – působení jemných pulzů na stimulaci dásní


5. Stiskem vypínače kartáček zapnete.

6. S mírným přitlakem opatrně a pomalu posouvajte kartáček po zubech s krátkými pohyby tam a zpět.


7. Účinnou pomůckou je rozdělení zubů s dásněmi do čtyř zón. Začínáte v zóně 1 a po každých 30 sekundách přejděte do další zóny. Kartáček se po každých 30 sekundách nakrátko vypne jako upozornění na potřebu přesunu do další zóny. Po dvou minutách se kartáček automaticky vypne.

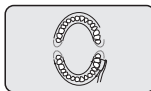

8. Podle obrázku pootočte a vytáhněte nástavec z rukojeti.

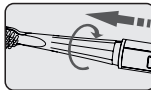

9. Nástavec i rukojeť opláchněte v tekoucí vodě a utřete do sucha.

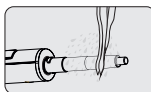


10. Uložte rukojeť do nabíječky.

Údržba

Před každým čištěním přístroje odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

Nabíječka

1. Tahem sundejte kryt nabíječky.
2. Povrch nabíječky a kryt otřete měkkou utěrkou.
3. Pravidelně otírejte zástrčku a dbejte, aby byla trvale v dobrém stavu. Prach a nečistota na zástrčce mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem, přehřívání nebo požáru.

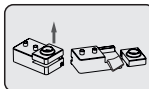

Kartáček

1. Kartáček se čistí samostatně.
2. Kartáček pravidelně otírejte zvlhčenou vlhkou utěrkou a ukládejte do nabíječky. Rukojeť se nesmí umývat ponořená.
3. Po každém použití opláchněte nástavec.
4. Nemyjte přístroj v myčce.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Kartáček nefunguje.	Koupili jste výrobek, který nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nechte přístroj nabít alespoň 24 hodin.
Slabé nebo slábnoucí vibrace.	Kartáček tlačíte na zuby příliš silně.	Kartáček na zuby přikládejte s citem.
Kartáček po nabití funguje jen krátce.	Končí životnost baterie.	Nechte baterii vyměnit v odborném servisu.
	Doba nabíjení nebyla dostatečná.	Nechte přístroj nabít alespoň 24 hodin.





Likvidace

Zdrojem napájení tohoto přístroje je recyklovatelná baterie typu NiMH. Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje. Přístroj zlikvidujte v souladu s předpisy platnými pro likvidaci elektrických zařízení. S případnými dotazy k recyklaci se obračejte na místní správu.

Vyjmutí a recyklace baterie

Přístroj se smí rozebírat pouze pro účely likvidace. Rozebráním se zničí. Dodržujte základní bezpečnostní opatření. Před demontáží baterie musí být zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.

1. Před demontáží baterii úplně vybijte.
2. Vyšroubujte šroub a vyndejte dvířka baterie.
3. Držte rukojeť vzhůru nohama, zatlačte na trn kartáčku a uvolněte oba háčky držící vnitřek rukojeti.
4. Vsuvte šroubovák za kontakty baterie a pootočením baterii uvolněte. Vyndejte tištěný spoj a vypačte baterii z plastového lůžka.
5. Baterii předejte na sběrném místě k recyklaci. S případnými dotazy k recyklaci elektrického odpadu se obračejte na místní správu.

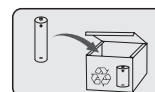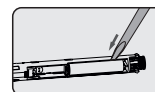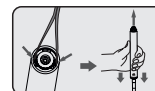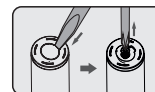

Dbejte, aby nedošlo ke zkratu mezi póly baterie. Demontované baterie už nepřipojujte k nabíječce nepřipojujte.

**Dr. Mayer
Life and Health**

Kontakty:
Distributor v ČR a SR:
Best Brands Company s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

info@bbcomp.cz
www.doctor-mayer.cz
nebo www.bbcomp.cz



Výrobce je držitelem osvědčení ISO 9001 a ISO 13485.