


Průvodce pro přenos dat

(tonometr OMRON M6 Comfort IT, OMRON M3 IT)

1) Nejříve musíte navštívit stránky www.omron-healthcare.com a zde se **zaregistrovat**.

2) Kliknutím na „**GO to Bi-Link**“ se dostanete na stránku: <http://bi-link.omron.com/Home/Landing>

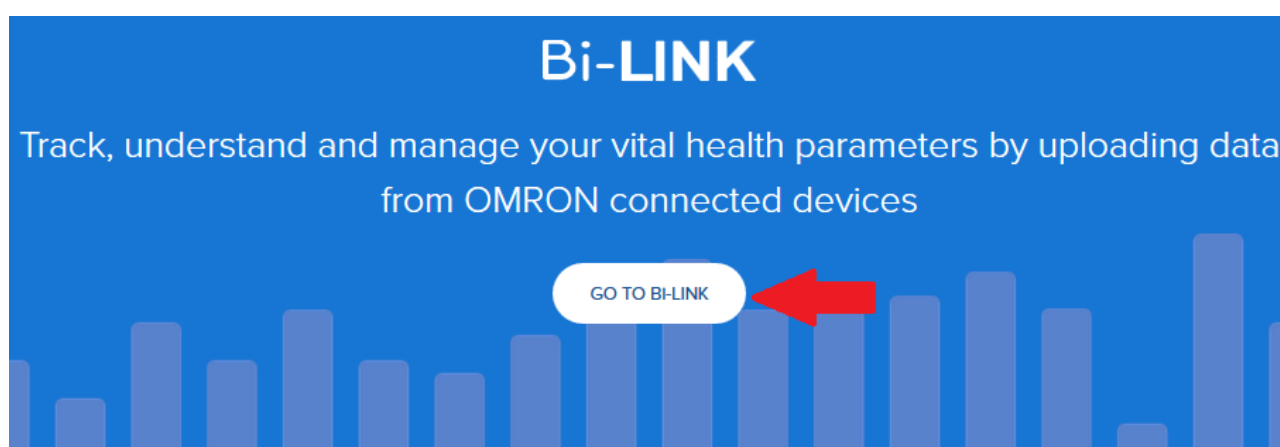


3) Zde si vytvoříte **uživatelský účet**.



Vyplňte všechna povinná pole (Jméno, Příjmení, Emailová adresa apod.), přijměte Podmínky a pravidla a dokončete registraci stisknutím tlačítka „**Registrovat**“.

Po úspěšné registraci se k nově vytvořenému účtu **přihlásíte** („Login now“).

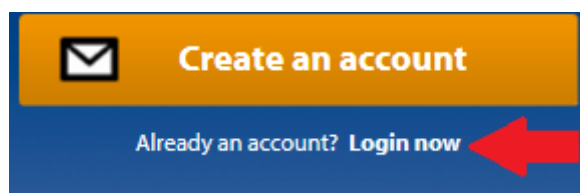

Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo a stiskněte Přihlásit:

Přihlásit

OMRON Pověření
Prosím zadejte uživatelské jméno a heslo. [Registrace](#)
Pokud nemáte účet.
Uživatelské jméno

Heslo


☐ Zapamatovat heslo?
 [Zapomenuté heslo?](#)

4) Pro nahrávání dat na Váš uživatelský účet je nutné si do PC **nainstalovat aplikaci Bi-LINK Gateway** (po úspěšném nainstalování aplikace budete tento krok při příštích přenosech dat přeskažovat).

Verze pro OS Windows:

Krok 1

Aplikaci Bi-LINK Gateway naleznete po přihlášení na Váš uživatelský účet (viz bod 3) v levém dolním rohu:

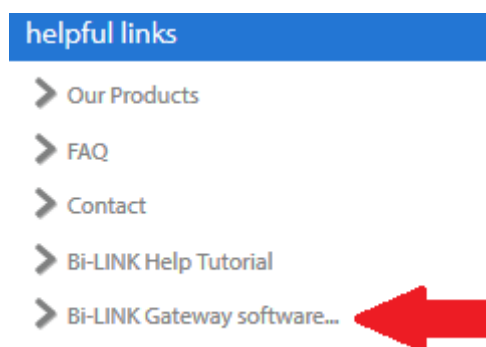

Krok 2

DOWNLOAD



How do I install the Bi-LINK Gateway desktop application to upload my data?

To upload your device data, please download and install the Bi-LINK Gateway utility. This utility is available for Windows PCs and it can be downloaded from: [Bi-LINK Gateway software download](#) 

I've Downloaded Bi-LINK Gateway, how do I upload my data?

Now that the Bi-LINK Gateway utility has been installed, login with your Bi-LINK account information. Once logged in, simply select your device.

Your device is now ready to upload. Simply insert your device data into your USB reader and select the matching device name from your personal Gateway library. Once you've chosen the device you wish to upload from, click "Upload Data" and "Start Upload". The Gateway utility will guide you through the device upload process.

I uploaded my data using the Bi-LINK Gateway Utility, how do I view my data?

Return to the Bi-LINK web application and click the Dashboard Tab. Note: there may be a brief delay after uploading before your data is available on the web.

 [back to dashboard](#)

STÁHNOUT



Jak nainstaluji aplikaci Bi-LINK Gateway desktop aplikaci, abych si mohl nahrát své údaje?

Chcete-li nahrát Vaše data z přístroje, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Bi-LINK Gateway. Tato aplikace je k dispozici pro operační systém Windows a lze ji stáhnout na: [Stažení Bi-LINK Gateway softwaru](#) 

Stáhnul jsem Bi-LINK Gateway, jak si nahraji své údaje?

Nyní, když byl nainstalován software Bi-LINK Gateway, přihlašte se na Váš Bi-LINK účet. Jakmile se přihlásíte, jednoduše si zvolte své zařízení.

Přístroj je nyní připraven k přenosu dat. Data přenesete ze zařízení pomocí USB kabelu a vyberte odpovídající název zařízení v Gateway softwaru. Jakmile jste si vybrali zařízení, ze kterého chcete data nahrát, klikněte na tlačítko "Nahrát data" a "Začněte nahrávat", Gateway software vás provede procesem nahrání dat ze zařízení.

Pomocí aplikace Bi-LINK Gateway jsem nahrál data, jak si mohu prohlédnout své údaje?


Vraťte se do webové aplikace Bi-LINK a klikněte na záložku úvodní stránky. Poznámka: po nahrání může nastat krátká prodávka, než budou Vaše data na webu k dispozici.

 [zpět na úvodní stránku](#)

Krok 3



Uložte soubor (kliknutím na „Uložit soubor“) do Vašeho PC.



Dojde ke stažení aplikace.


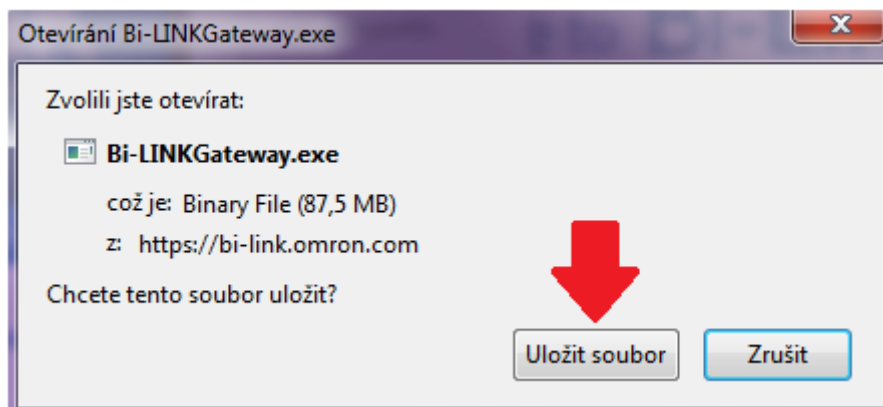



Krok 4

Po stažení nainstalujte tuto aplikaci (postupujte dle pokynů na obrazovce).

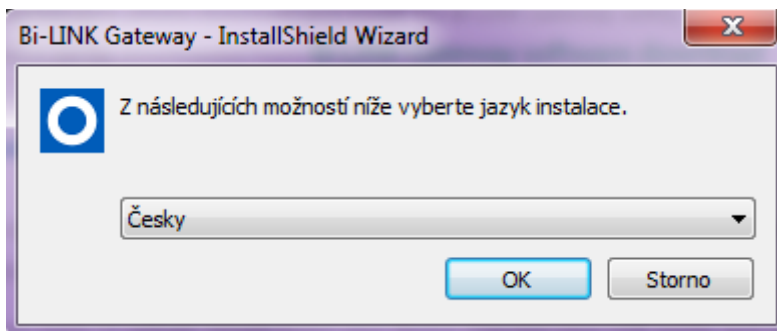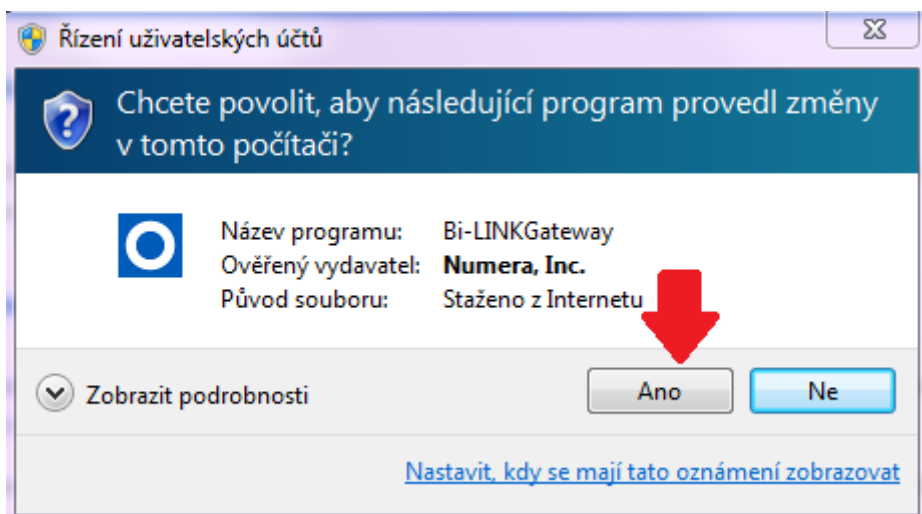

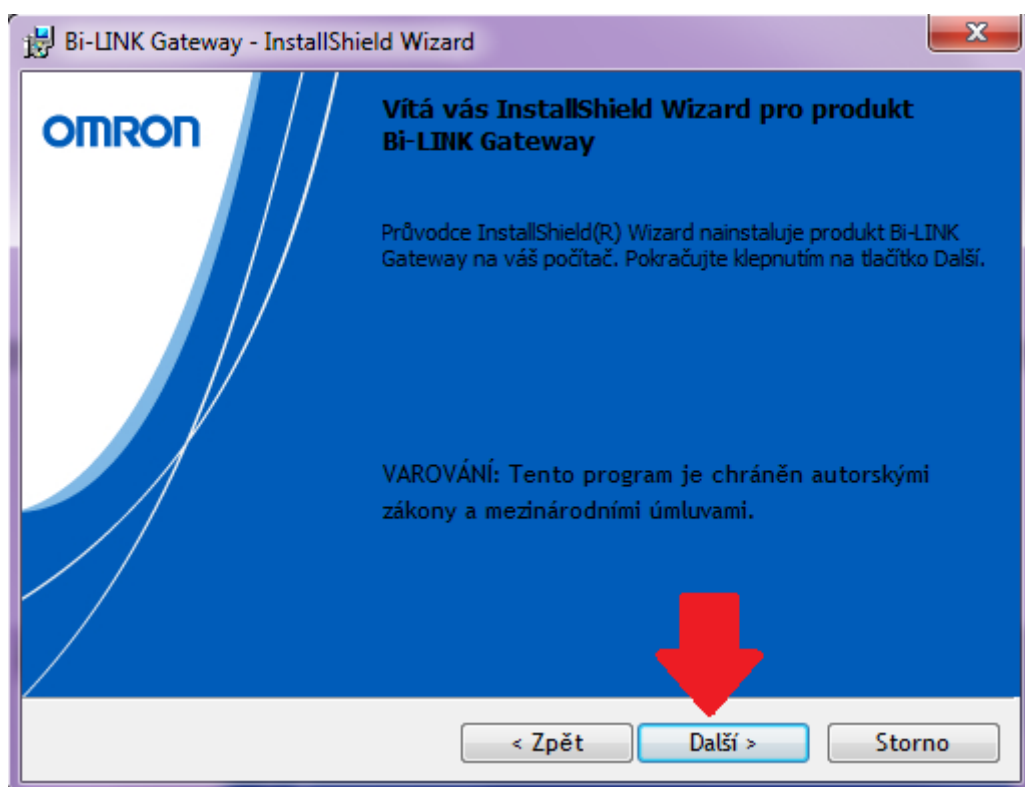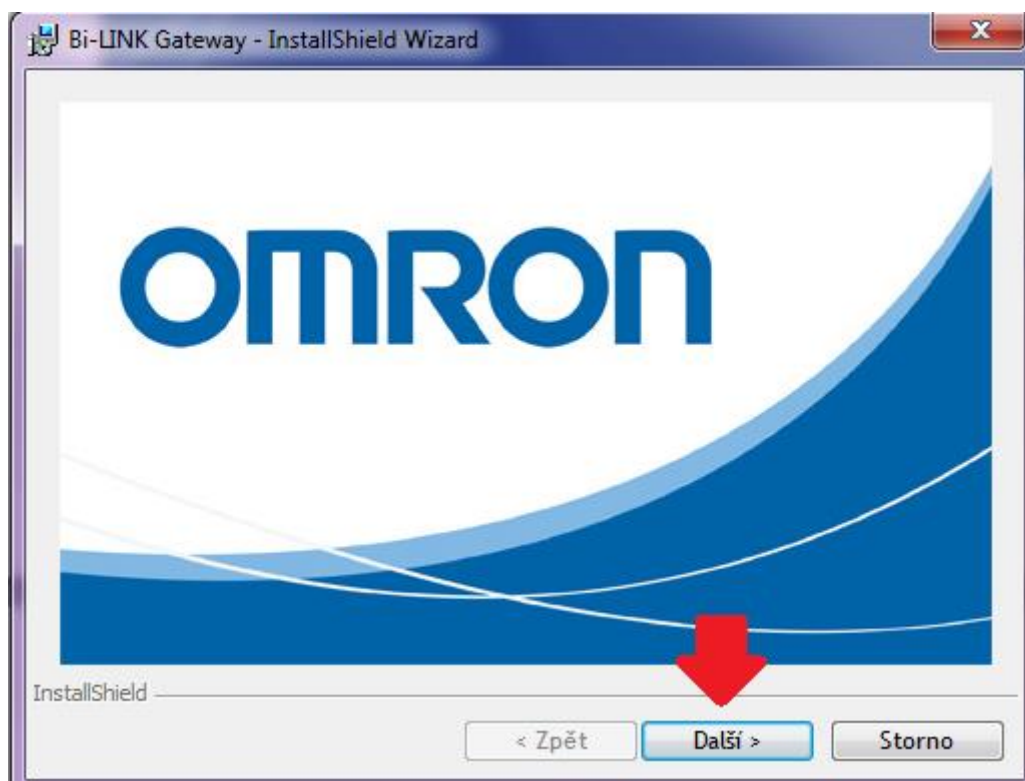

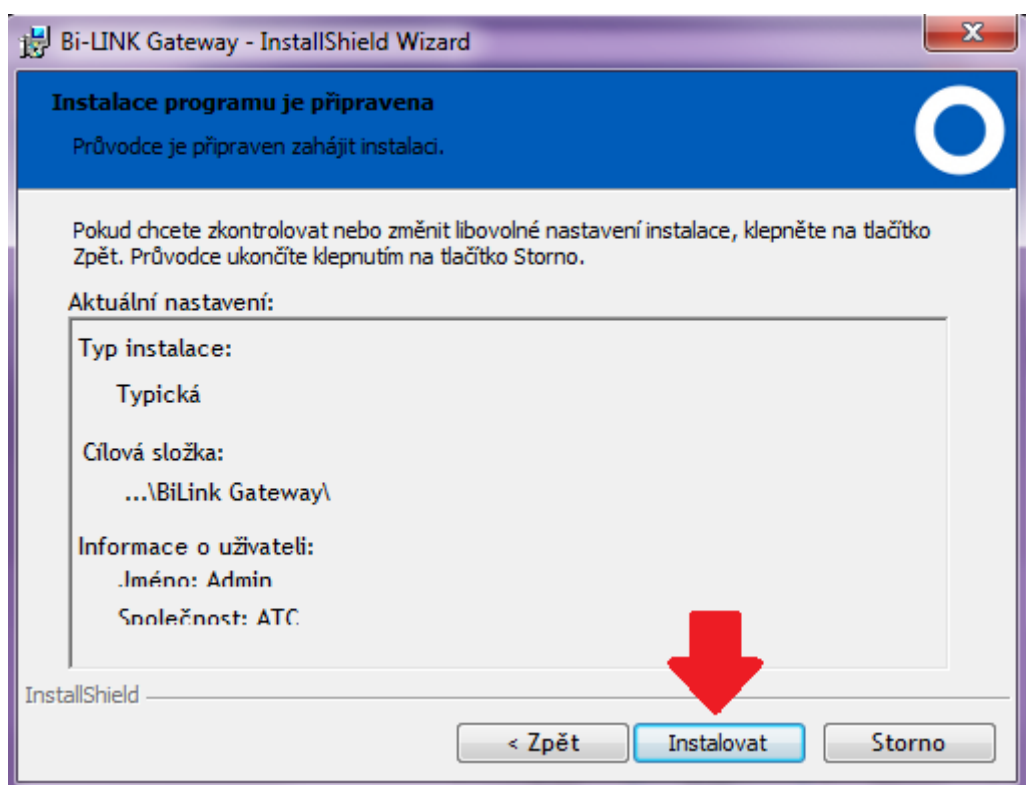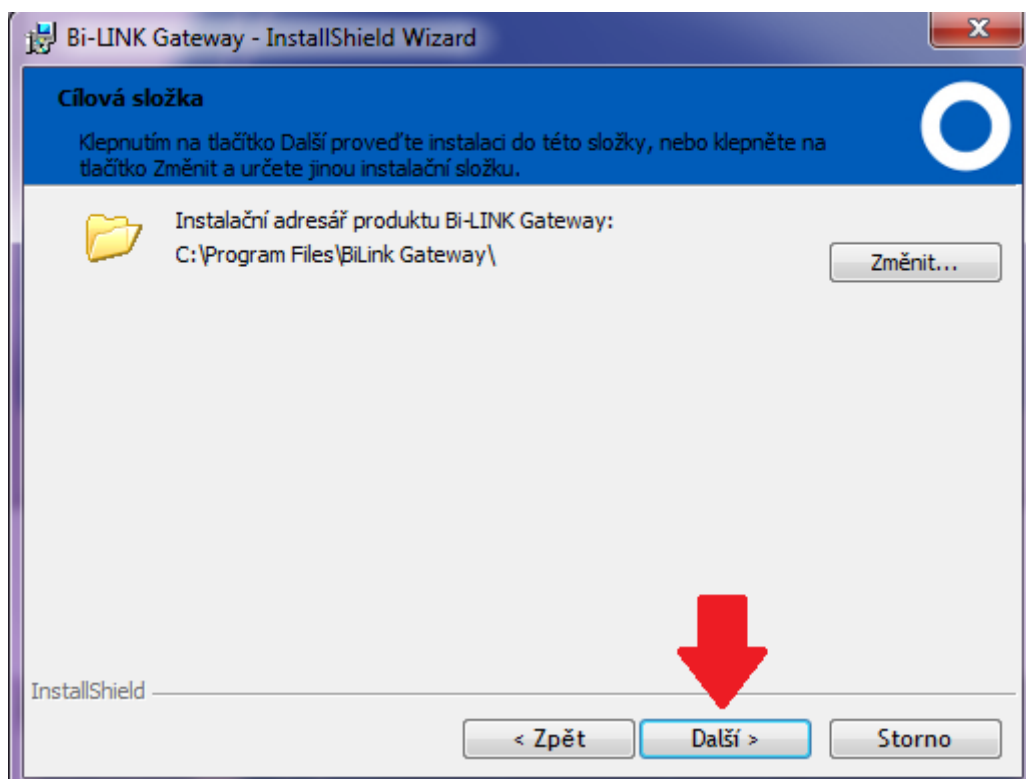


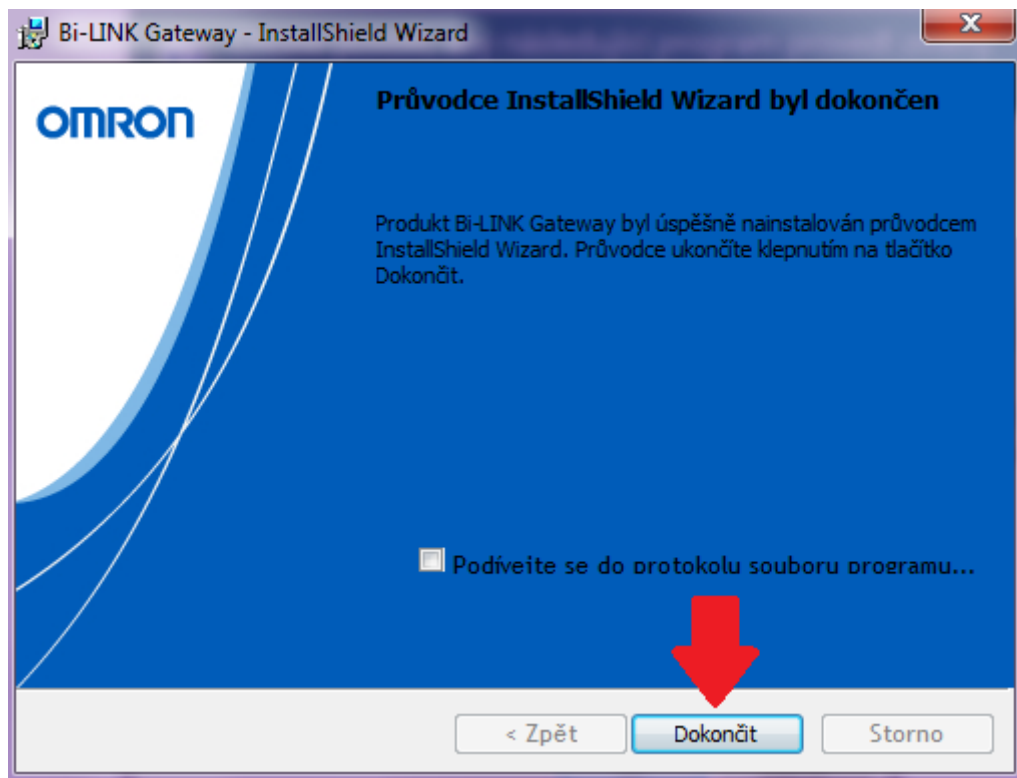

5) Po stažení aplikace do Vašeho PC spusťte aplikaci **Bi-LINK Gateway**, kterou naleznete na svém PC na pracovní liště v pravém dolním rohu (modrá ikona s bílým kolem).



Na modrou ikonu s bílým kolem klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „**Zobrazit Bi-LINK Gateway**“.

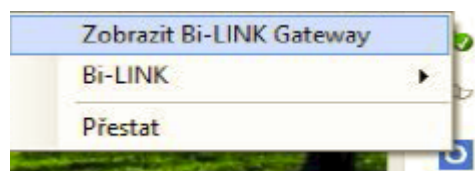


Aplikaci Bi-LINK Gateway lze spustit i přes ikonu, staženou přímo na Vaší pracovní ploše, a to dvojnásobným kliknutím levým tlačítkem myši.

Zobrazí se Vám okno – viz následující bod.




6) Při prvním použití klikněte na tlačítko: „**Vytvořit účet**“.

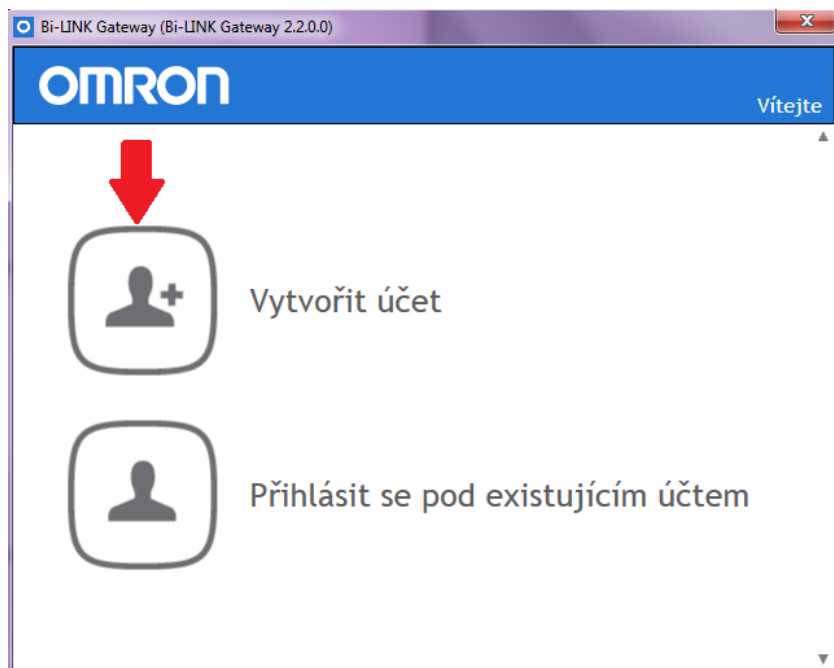

Vyplňte všechna povinná pole (*doporučení: použijte shodné přihlašovací údaje, jako u registrace na stránkách www.omron-healthcare.com - viz bod 3*), přijměte licenční ujednání a dokončete registraci stisknutím tlačítka „**Registrovat**“.

Pro další přihlášení klikněte na tlačítko „**Přihlásit se pod existujícím účtem**“.

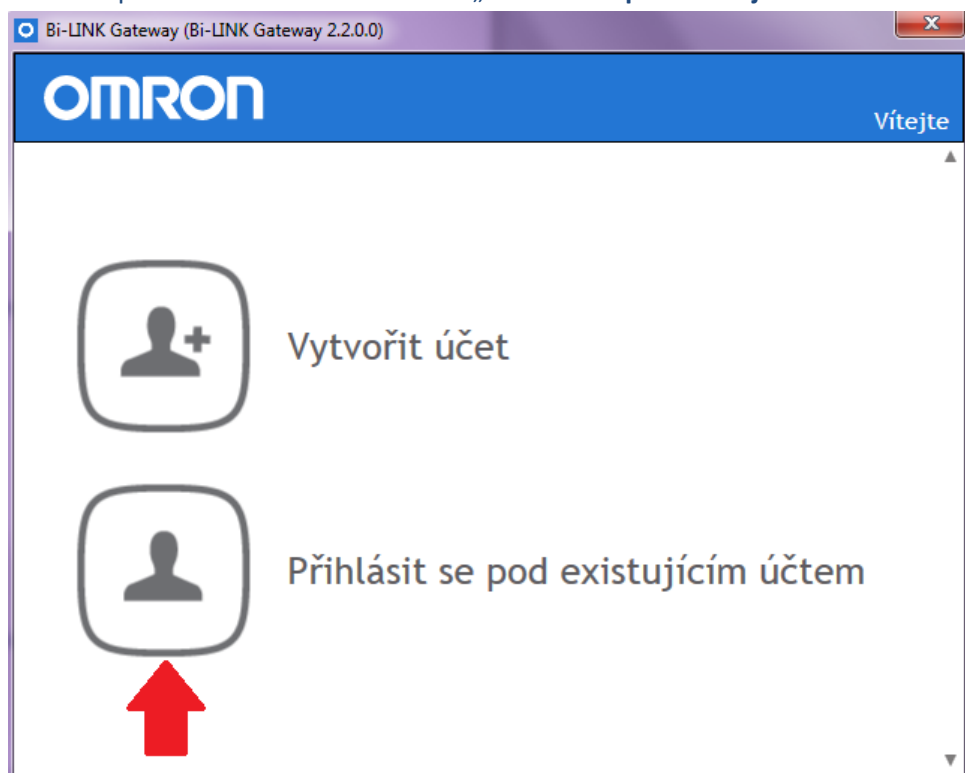

Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo a stiskněte „přihlásit se“.


The screenshot shows the login interface of the Bi-LINK Gateway (version 2.2.0.0). The window has a blue header with the Omron logo on the left and a 'Přihlásit se' button on the right. Below the header, there is a left-pointing arrow button. The main area contains two input fields: 'Uživatelské jméno' (Username) and 'Heslo' (Password). Below these fields is a checkbox with a checkmark icon and the text 'Zapamatovat si mě' (Remember me). A large blue button labeled 'přihlásit se' (Log in) is positioned below the checkbox. At the bottom, there is a link that says 'Zapomněli jste heslo?' (Forgot your password?).

7) Zvolte přístroj (M3 IT nebo M6 Comfort IT), ze kterého chcete stáhnout data.


The screenshot shows the device selection interface of the Bi-LINK Gateway (version 2.2.0.0). The window has a blue header with the Omron logo on the left and a 'Zvolit přístroj' (Select device) button with a dropdown arrow on the right. Below the header, there is a list of four blood pressure monitors, each with a circular icon showing '135' over '85' and a right-pointing arrow button. The devices listed are: 'M3 IT Blood Pressure Monitor' (HEM-7131U-E), 'M400 IT Blood Pressure Monitor' (HEM-7131U-D), 'M6 Comfort IT Blood Pressure Monitor' (HEM-7322U-E), and 'M500 IT Blood Pressure Monitor' (HEM-7322U-D). A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

8) Připojte Váš přístroj (M3 IT nebo M6 Comfort IT) přes USB kabel do PC. Na displeji přístroje bliká čtverec  a symbol přenosu dat  je zobrazen. Pokud tyto dva symboly na displeji zmizí, je nutné je pro přenos dat znovu zobrazit, a to stisknutím tlačítka START/STOP.


Jelikož přístroje M6 Comfort IT a M3 IT disponují pamětí pro 2 uživatele (uživatel A, uživatel B), zvolte si příslušného uživatele A nebo B (viz obrázek níže), ze kterého chcete data stáhnout. Poté klikněte na tlačítko „nahrát“.

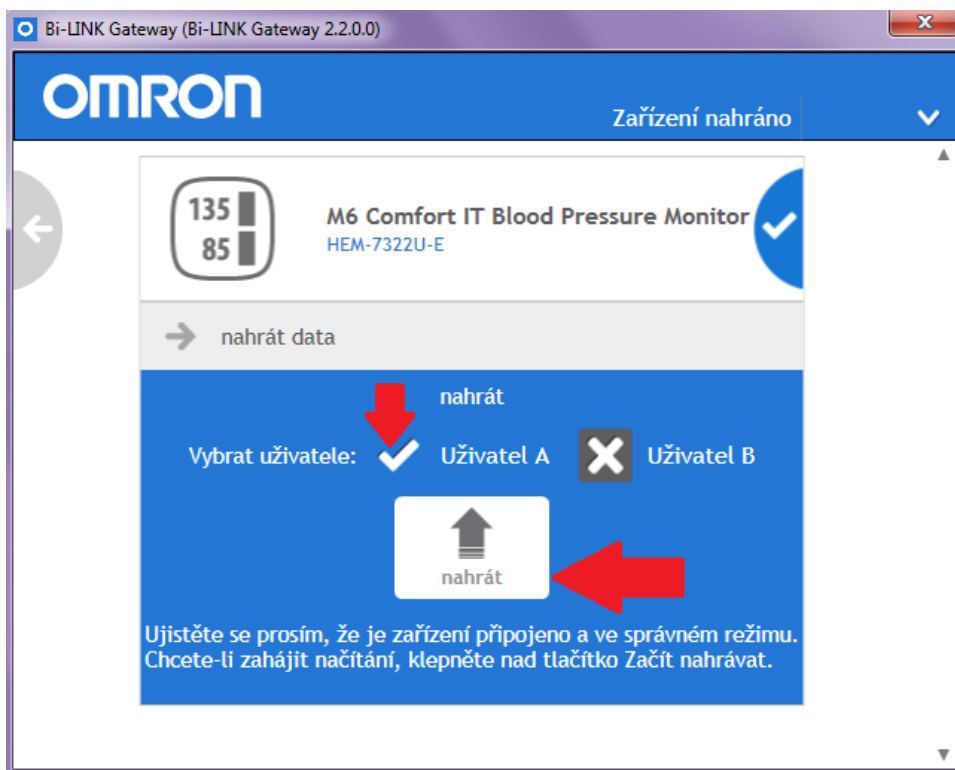

Data jsou nahrávána, zobrazí se: „Nahrávání dat“:

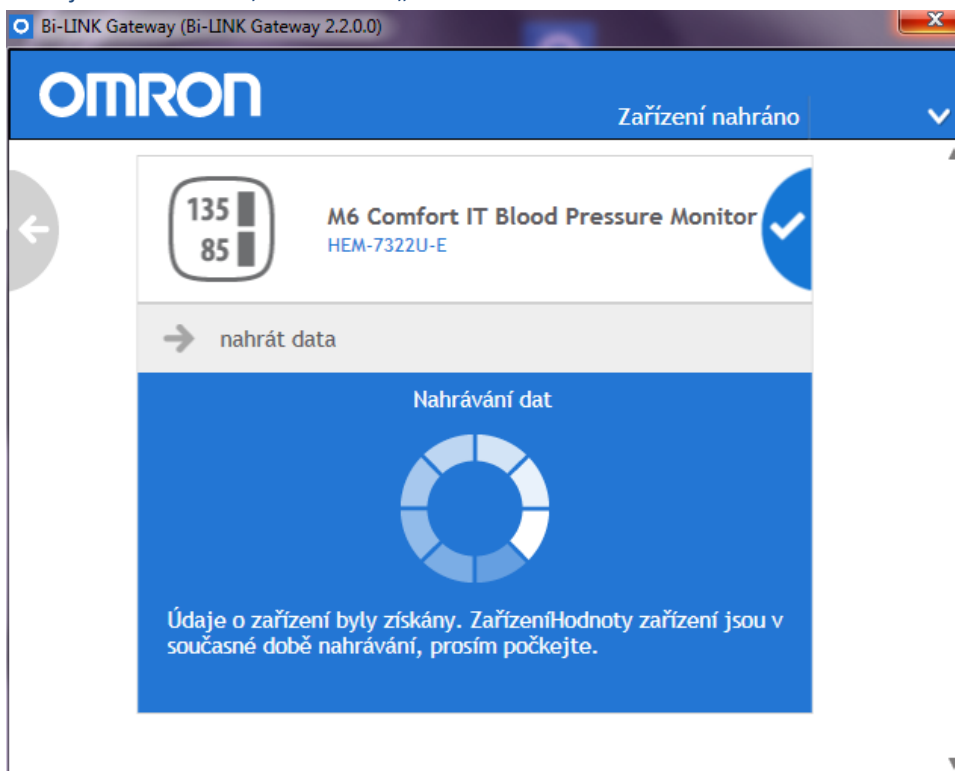

9) Po úspěšném přenesení dat klikněte na tlačítko „náhled“.

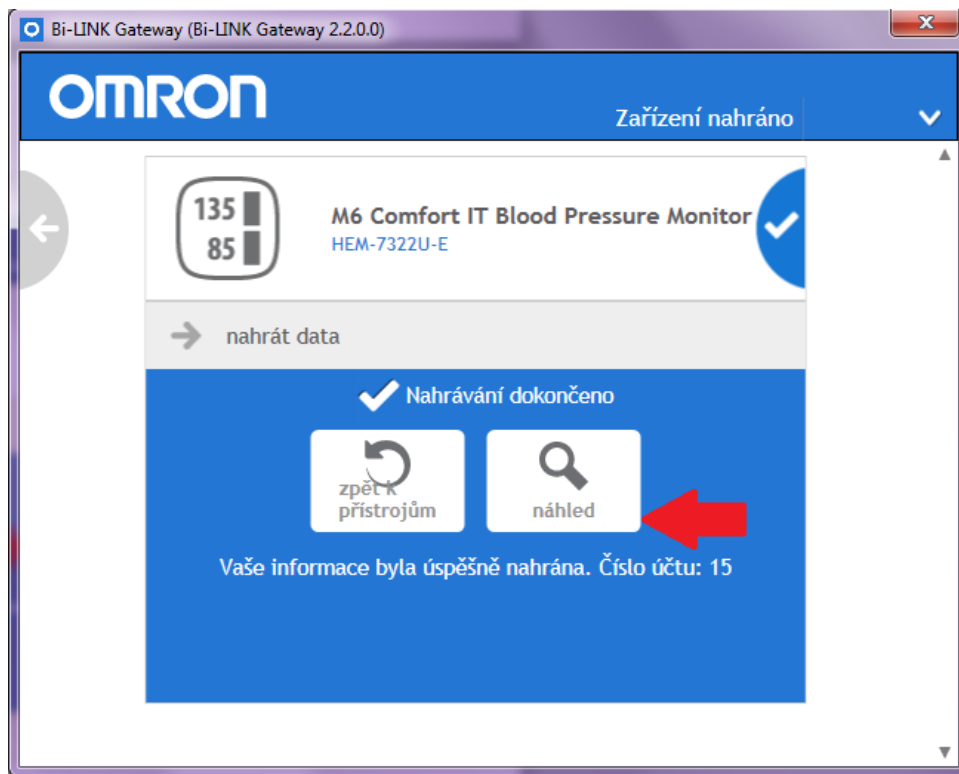

10) Přes Váš internetový prohlížeč budete přesměrováni k Vašemu účtu (je nutné být přihlášen – viz bod 3) a data se Vám přenesou (uloží) do Vašeho účtu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Podmínkou přenesení stažených dat do Vašeho uživatelského účtu webové aplikace Bi-LINK je připojení k internetu. Pokud nejste připojeni k internetu, data se nenahrají ani neuloží.

